



## Вертикализатор «Дженкс Обезьянка»



Вертикализатор «Дженкс Обезьянка» это идеальный первый вертикализатор для вертикализации ребёнка с прямым наклоном вперед и регулировкой угла наклона от вертикального до 20 градусов. Это универсальная, легкая в эксплуатации конструкция, обладающая рядом отличных характеристик. На протяжении долгого времени «Обезьянка» является самой популярной стойкой в мире и легко увидеть - почему!

У «Обезьянки» очень дружелюбный вид и она привлекает детей и вызывает у них желание находиться на нем. Яркий столик с контрастным ободком предоставляет много возможностей для различных занятий. Столик можно использовать со сплошной поверхностью или сняв крышку, с отверстием и вставным ведерком.

Стояние – это важный процесс для развития ребенка и наклонное стояние дает массу выгод. Наклонное стояние помогает детям привыкать к весовой нагрузке. Для социальной адаптации ребенка важно, что он может стоять рядом со своими сверстниками.

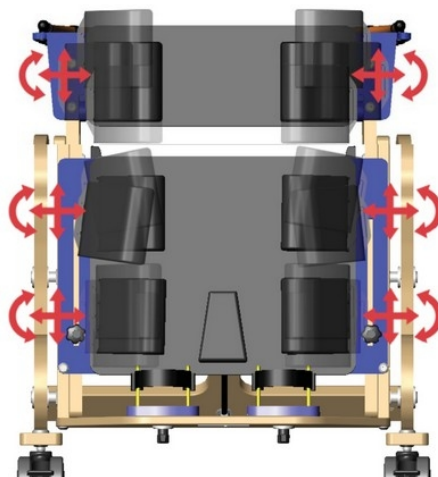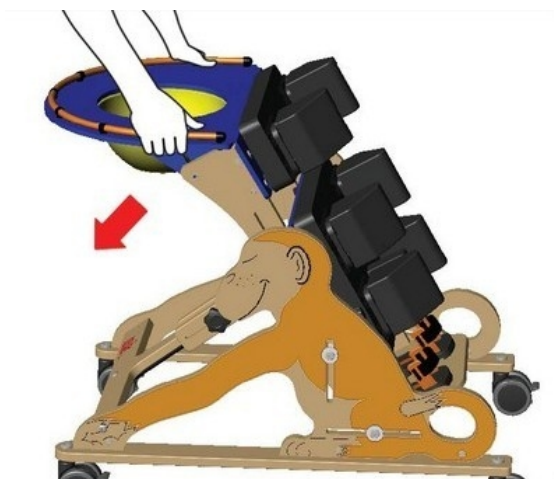

Эта стойка позволяет менять угол наклона от 20° (от горизонтали) до вертикального. Регулировка угла осуществляется с помощью газового механизма. Также можно отрегулировать высоту, положение сандалий, положение абдукционного блока и расстояние между боковыми подушками.

Обезьянка включает в себя: основание, сандалии, рама, столик с ведерком, все крепления, ремешки безопасности и боковые подушечки.


Стандартная комплектация включает: раму, крепления для нижней части тела и груди, позиционирующие подушечки для нижней части тела и торса, нагрудные и бедренные ремни, регулируемый столик с выемкой и вкладышем, подножку, сандалии и 75 мм ролики.

Аксессуары: рама для занятий, поручень, блоки для сандалий

### **Особенности «Обезьянки»:**

- Новая стойка «Обезьянка» снабжена тремя парами индивидуально настраиваемых боковых подушечек. Каждая подушечка регулируется по высоте, ширине и углу, предлагая множество возможностей для позиционирования.
- Крепления для нижней части тела и торса регулируются по высоте в соответствии с изменяющимися пропорциями тела.
- Нагрудные подушечки прикрепляются к креплениям для груди и регулируются по ширине и углу. Боковые подушечки следует использовать вместе с подушечками для нижней части тела, чтобы дать ребенку устойчивость при удержании тела на средней линии.
- Крепления для нижней части тела поддерживают ноги у очень маленьких детей.

- Боковые подушечки для нижней части тела дают устойчивость бедрам и ногам ребенка и помогают держать спину прямо. Они регулируются по высоте, ширине, углу.

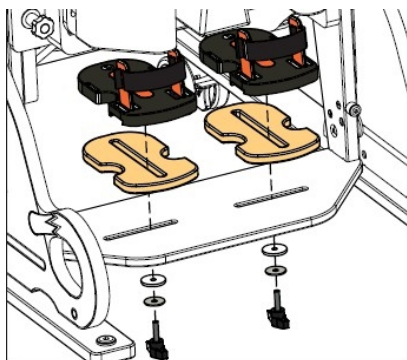

- Сандалии открываются сзади для удобства перемещения на стойку, регулируются независимо, а двойные ролики снабжены блокираторами.
- Боковые крепления для туловища легко регулируются, вмещая ребятишек с разным телосложением.
- Блок для abduction ног крепится легко, используя «велкро»
- Комфортное покрытие обеспечивает более долгое удобное нахождение на «Обезьянке».
- Перемещается на 75мм колесиках с тормозами.
- Очень привлекательный вид для ребёнка, родителей и специалистов

**Ориентировочно, вертикализатор спроектирован для детей возрастом от 9 месяцев до 4 лет**

Макимальный вес ребенка	25 кг
Минимальная высота «Обезьянки»	550мм
Площадь занимаемая «Обезьянкой» на полу	830x570 см
Вес «Обезьянки»: 18.2кг	18,2 кг
Ширина на уровне грудной клетки и таза регулируется	От 140 до 260мм
Высота от пола до подмышки ребенка	от 510мм до 750мм
Рабочая площадь столика	480 x 350мм

**Rehab+medical**

**ООО «Рехаб энд Медикал» Россия 129626, г.Москва, ул.Новоалексеевская, дом 20а, стр.1, офис № 15. тел/факс (495) 644-31-43, 686-40-47, 956-16-76 e-mail: [info@rehabmedical.ru](mailto:info@rehabmedical.ru) [www.rehabmedical.ru](http://www.rehabmedical.ru)**